


Instruktioner til: Model til anlæggelse af urinkateter, LM-061

Vær forsigtig ved brug:

- **Anvend kateter str. 14 Fr. eller mindre.** Fyld ballonen med **MAX 5 ml** vand for ikke at ødelægge ventil 1 (se figur A)
- **Anvend gel**
- Hvis der bruges andre katetre end det vedlagte kan der opstå besvær med den praktiske træning som f.eks. lækage af vand eller blokering så kateteret ikke kan komme igennem ventilen.
- Vandet i blæren flyder fra urinrørets åbning når kateteret er indført ca. 45 mm i dybden.
- Kateterets ballon må først pustes op, når kateteret er ført mere ind end 40 mm fra enden af kateterballonen og gennem ventil 1, ellers ødelægges ventilen. (se figur A)

Figur A :

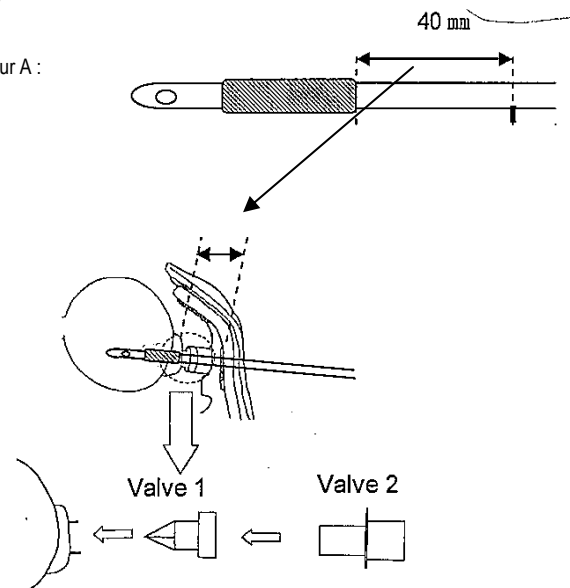


Håndtering af attrappen:

- Sæt slange-connectoren ind i blæren og fastspænd den med spændebåndet.
- Saml vulva og blære, så mærkerne er overfor hinanden

- Sikr at forbindelsesleddet mellem slagen og blæren og de to urinrørsconnectorer er sat godt fast. (Løse forbindelser kan medføre lækage) (Se figur B)

Figur B:

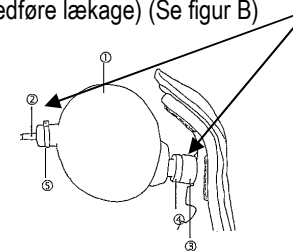

- Skub vandreservoiret og blæren gennem kroppen fra forsiden (ydresiden). Sæt vulva fast med velcro strimlerne.
- Tryk på blæren med fingrene for at fjerne luften i den
- Hæng vandforsyningsposen op, spænd klemskruen på slangen og hæld vand i posen.
- Åbn klemskruen og vandet siver ned i blæren (der opstår tryk inde i blæren)
- Brug et kateter à demeure i størrelse 14Fr. eller tyndere. Hvis der benyttes andre katerstørrelser risikeres lækage eller skader på ventilerne.
- Før kateteret gennem ventilen til der kommer "urin"

Efter brug:

- Tryk på blæren for at tømme den helt for vand.

Sådan skilles blæresystemet ad

- Fjern vulva ved at skille connectorene mellem blære og vulva ad
- Fjern spændebåndet mellem slangen og blæren ved at vride det fra side til side.
- Fjern urinrørsconnector fra blæren.

Rengøring:


- Ventilerne adskilles og vaskes efter brug
- "Blæren" fjernes og tømmes efter brug
- Lad blære og vandreservoiret tørre inden attrappen pakkes ned i tasken til opbevaring.
- Brug aldrig opløsningsmidler som f.eks. fortyndervæske, benzin og alcohol.

Instruktioner til: Model til anlæggelse af urinkateter, LM-061

Vær forsigtig ved brug:

- **Anvend kateter str. 14 Fr. eller mindre.** Fyld ballonen med **MAX 5 ml** vand for ikke at ødelægge ventil 1 (se figur A)
- **Anvend gel**
- Hvis der bruges andre katetre end det vedlagte kan der opstå besvær med den praktiske træning som f.eks. lækage af vand eller blokering så kateteret ikke kan komme igennem ventilen.
- Vandet i blæren flyder fra urinrørets åbning når kateteret er indført ca. 45 mm i dybden.
- Kateterets ballon må først pustes op, når kateteret er ført mere ind end 40 mm fra enden af kateterballonen og gennem ventil 1, ellers ødelægges ventilen. (se figur A)

Figur A :

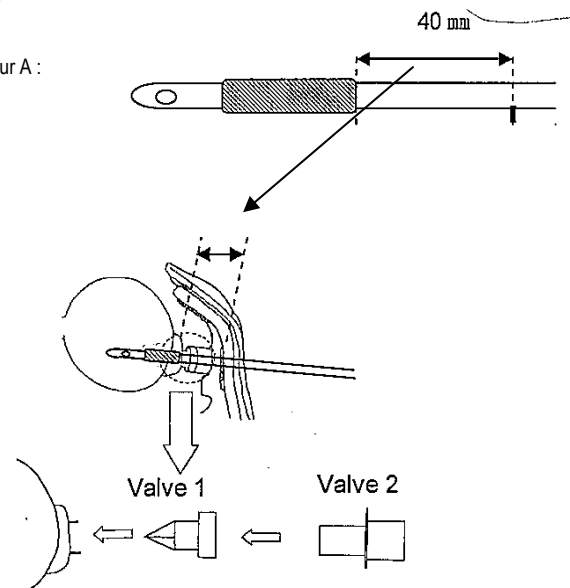


Håndtering af attrappen:

- Sæt slange-connectoren ind i blæren og fastspænd den med spændebåndet.
- Saml vulva og blære, så mærkerne er overfor hinanden

- Sikr at forbindelsesleddet mellem slagen og blæren og de to urinrørsconnectorer er sat godt fast. (Løse forbindelser kan medføre lækage) (Se figur B)

Figur B:

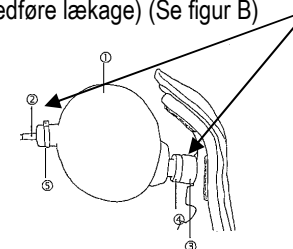

- Skub vandreservoiret og blæren gennem kroppen fra forsiden (ydresiden). Sæt vulva fast med velcro strimlerne.
- Tryk på blæren med fingrene for at fjerne luften i den
- Hæng vandforsyningsposen op, spænd klemskruen på slangen og hæld vand i posen.
- Åbn klemskruen og vandet siver ned i blæren (der opstår tryk inde i blæren)
- Brug et kateter à demeure i størrelse 14Fr. eller tyndere. Hvis der benyttes andre katerstørrelser risikeres lækage eller skader på ventilerne.
- Før kateteret gennem ventilen til der kommer "urin"

Efter brug:

- Tryk på blæren for at tømme den helt for vand.

Sådan skilles blæresystemet ad

- Fjern vulva ved at skille connectorene mellem blære og vulva ad
- Fjern spændebåndet mellem slangen og blæren ved at vride det fra side til side.
- Fjern urinrørsconnector fra blæren.

Rengøring:

- Ventilerne adskilles og vaskes efter brug
- "Blæren" fjernes og tømmes efter brug
- Lad blære og vandreservoiret tørre inden attrappen pakkes ned i tasken til opbevaring.
- Brug aldrig opløsningsmidler som f.eks. fortyndervæske, benzin og alcohol.